

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего
дилера или
на сайте wh.com



Просто. Эффективно. Быстро.

Assistina Twin теперь с системой
Quick Connect by W&H



assistina  TWIN

Смазка за рекордное время

Никогда прежде обслуживание инструментов не было таким быстрым, как с Assistina Twin. Благодаря инновационной технологии распыления масла компании W&H удалось сократить время, затрачиваемое на обслуживание, до рекордных 10 секунд. Мгновенное обслуживание с основательным результатом.



Новаторская технология
Основательная, всесторонняя смазка элементов привода (оранжевый цвет) и очистка спреевых каналов (зеленый цвет) благодаря инновационной технологии распыления масла.

Инновационная система

Масло принимает форму аэрозоля, после чего под высоким давлением продувается через инструмент. В результате загрязнения из внутреннего пространства инструмента удаляются еще эффективнее. Тонкодисперсный аэрозоль достигает самых удаленных уголков без необходимости перемещения элементов привода. Все аэрозоли удаляются из технологических камер при помощи активного отсоса и встроенного HEPA-фильтра.

Практичность для любых клиник

Аппарат Assistina Twin легко адаптировать к условиям вашей клиники. Он справляется с очисткой и смазкой 360 инструментов в час благодаря не только инновационной технологии с коротким временем обработки, но и эргономичному дизайну и большому выбору адаптеров.

Д-р Кристиан Мюллер,
стоматолог с частной практикой

«Теперь я уверен, что инструменты между лечебными манипуляциями можно подготавливать без задержек для меня и моих пациентов. Несомненно, выгодное приобретение для клиники».




Assistina Twin с системой **Quick Connect by W&H**

Assistina Twin фирмы W&H — это уникальный прибор для очистки и обслуживания. Неоспоримые преимущества: инновационная система двух камер, рекордные сроки смазки и экологически безвредный набор Care Set.

А теперь Assistina Twin дополнен инновационным решением адаптеров: **Quick Connect by W&H**.

Эта система адаптеров дает еще больше преимуществ в повседневной работе.

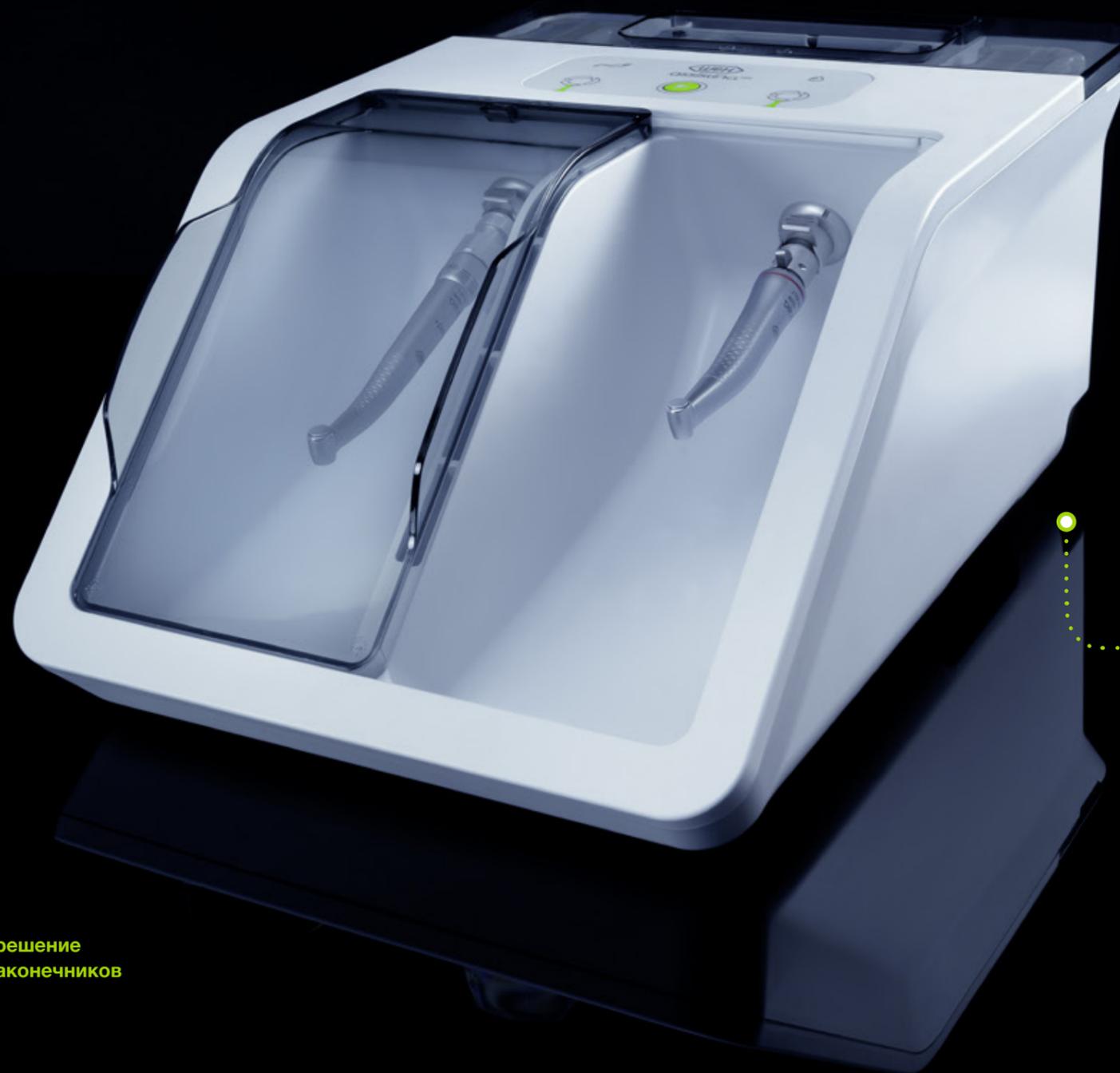

Quick. Click. Check.

Простота управления

Кнопка деблокировки максимально упрощает и ускоряет процессы присоединения и отсоединения наконечников.

Быстрая замена адаптеров

Благодаря оптимальной подготовке различные адаптеры можно подготавливать до укладки в прибор, а также во время процесса обслуживания.

Быстрая реакция

Можно заранее подобрать только необходимые адаптеры.

Улучшение рабочих процессов

Благодаря простоте приведения в действие и скорости соединения с адаптерами Quick ISO или Quick RM.



**Инновационное решение
адаптеров для наконечников**

Смазка без задержек

Зеленый свет экономичности: с Assistina Twin задержки при смазке останутся в прошлом. Это первый аппарат для подготовки инструментов, оснащенный двумя технологическими камерами, которые можно использовать по очереди, что позволяет загружать аппарат безостановочно. Подготовка без стресса, беспрецедентная эффективность!

Сандра Шнеп,
ассистент стоматолога

«Ух ты, вот это скорость! Благодаря двухкамерной системе я трачу на подготовку инструментов в несколько раз меньше времени. Работает очень тихо и классно выглядит».



Работает как по маслу



1
Подсоединить инструмент
в камере 1.

2
Закреть камеру 1
и запустить процесс.

3
Подсоединить второй инструмент
и закрыть камеру 2, как только
закончится процесс в камере 1.

4
Извлечь инструмент
из камеры 1 и повторить
шаги 1–2.



Точно соответствует вашим требованиям


Благодаря встроенной системе Quick Connect by W&H аппарат Assistina Twin максимально приспособляется к рабочему процессу, что существенно повышает эффективность работы. Почему? Потому что прибор для очистки и обслуживания можно оснастить только теми адаптерами, которые действительно нужны для используемых вами наконечников.



Quick RM для турбинных наконечников




Quick ISO для прямых и угловых наконечников

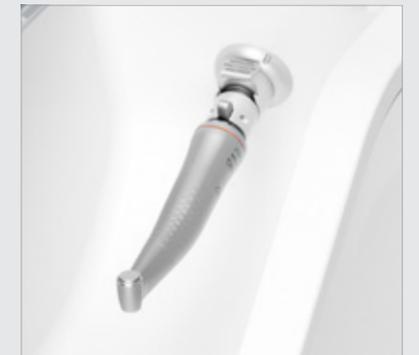

Простая и быстрая замена адаптеров оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность работы.

Вам решать, какие адаптеры действительно нужны. Оснастите Assistina Twin на свое усмотрение и вставьте в обе камеры нужные адаптеры.

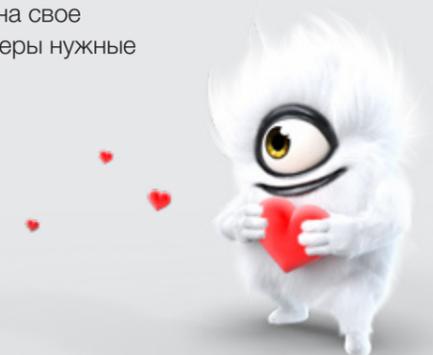

Для дополнительных адаптеров и обзора всей системы сканируйте QR-код.:

Тщательная смазка при минимальном расходе

Благодаря умной системе контроля за процессом Assistina Twin выполняет основательное обслуживание инструментов при минимальном расходе смазки. Набор Assistina Twin Care Set требует замены лишь после обработки примерно 2800 инструментов. Обслуживание инструментов становится не только надежнее и быстрее, но и выгоднее.



* 400 мл в каждом баллоне со спреем.

Набор Assistina Twin Care Set равнозначен 20 баллонам со спреем*.



Набор Twin Care Set состоит из одного картриджа очищающего раствора, одного картриджа масла Service Oil F1 и HEPA-фильтра. Все расходные материалы легко и просто заменяются без использования инструментов.

Полный цикл ПОДГОТОВКИ

Стерилизация, очистка и обслуживание приобретают все большее значение в стоматологической практике. W&H предлагает самые лучшие технологии для протоколов гигиены в качестве комплексного решения для подготовки инструментов и насадок.



Технические данные


CE

Тип:	MB-302 Assistina Twin
Процесс	Очистка спреевых каналов, смазка
Назначение	Прямые и угловые наконечники, турбинные наконечники, пневматические инструменты для снятия зубного камня, воздушные моторы
Сетевое напряжение	100–240 В перем. тока
Максимальная потребляемая мощность	18 В·А
Расход воздуха	Ок. 40 норм. л/мин
Рабочее давление	5–10 бар (регулировка с помощью встроенного автоматического регулятора)
Размеры (Ш x Г x В)	297 x 435 x 190 мм
Вес	3,5 кг
Емкость	200 мл очищающего раствора W&H Activefluid 200 мл сервисного масла W&H Service Oil F1

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:



Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.
Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20458 ARU Rev. 003 / 14.06.2022
С правом на изменения