

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora no seu
fornecedor ou
em **wh.com**



bom, melhor, perfecta.

Competência em
Laboratórios desde 1926



perfecta

People have Priority



Jürgen Auffarth

proprietário de laboratório dentário e técnico,
Salzburg, Áustria

»São instrumentos silenciosos,
elegantes e potentes.«



Enrico Steger

técnico em odontologia e fundador da empresa
Zirkonzahn, Gais-Südtirol, Itália

»Há anos que também utilizamos peças de
mão da W&H em nossos aparelhos.«



Wolfgang Weisser

proprietário de laboratório e redator, Aalen, Alemanha

»O aparelho é um valor agregado
em nosso laboratório.«



Bem vindo à W&H

Êxito em todo o mundo

A empresa familiar W&H está entre as líderes mundiais em fornecimento de aparelhos de precisão para técnica dentária. Para a W&H trabalham cerca de 1.200 colaboradores em todo o mundo.



Competência em Laboratórios desde 1926

A fabricação de peças de mão para técnicos em prótese dentária iniciou em 1926. O desenvolvimento, produção e serviços até hoje permanecem em Salzburgo.



Melhor assistência. Garantia de 24 meses

People have Priority: Na W&H o ser humano está no centro da questão. Para eles o lema é: Você compra um produto de qualidade, que vem sendo desenvolvido e produzido há muito tempo, e goza de garantia de 24 meses e de uma assistência de alta qualidade.

O aparelho adequado para cada tipo



Naomi M.

da Ásia, 23 anos,
Técnica dentária contratada há 3 anos

Perfecta 300

»Qualidade perfeita – aguenta tudo!
E ainda recebo uma assistência de qualidade!«



Emanuel C.

da América do Sul, 41 anos,
Técnico dentário independente

Perfecta 600

»Não preciso mais usar a pistola de ar pois a
peça de mão tem a função ar comprimido
integrada!«



Carl S.

da América do Norte, 37 anos,
Diretor de um laboratório dentário

Perfecta 900

»Uau! Muito mais potência que uma turbina. Ideal para
trabalhos em cerâmica.«



Resumo dos tipos de Perfecta



	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900	Conjunto Perfecta 900*
Peças de mão				
Peça de mão técnica com 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 rpm	●	–	–	–
Peça de mão motorizada com 7,8 Ncm, 1.000 – 50.000 rpm	–	●	○	●
Peça de mão de alta rotação com 0,7 Ncm, 5.000 – 100.000 rpm	–	–	●	●
Motor sem escovas	●	●	●	●
Utilizável para diâmetros de ferramenta de 1,6 / 2,35 / 3,0 mm	–/●/○	–/●/○	●/○/○	●/●/○
Funções especiais				
Função de jateamento	–	●	●	●
Programas automáticos Bistabil / Tempomat	●/–	●/●	●/●	●/●
Rotação direita e esquerda	●	●	●	●
Variantes de aparelho				
Aparelho de mesa com pedal de acionamento / aparelho de joelho / aparelho de pé	●/●/●	●/●/●	●/●/–	●/●/–
Unidade de comando externo (opcional no caso de aparelho de pé)	●	●	●	●
Motor »E-type« com acoplamento ISO, 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 rpm	○	–	–	–
Garantia				
24 meses	●	●	●	●
Acessórios				
Suporte para unidade de comando externo	○	○	○	○
Adaptador de aparelho de fresa	–	–	○	○
Peça de mão técnica 945 para motor ISO	○	–	–	–

● Equipamento padrão
○ opcional
– não disponível
Maiores informações em wh.com

*O conjunto Perfecta 900 com as duas peças de mão não é vendido separadamente. Para ele é necessário encomendar também a peça de mão motorizada e o cabo correspondente.



Silvia L.
da Europa, 51 anos,
proprietária de laboratório

Conjunto Perfecta 900*
»Os meus locais de trabalho: Um aparelho –
duas peças de mão – todos os materiais!«



Peças de mão com perfeição integrada

As duas peças de mão têm uma função de jateamento integrada. Isso evita a necessidade de se usar constantemente a pistola de ar e, desse modo, poupa muito tempo. Além disso, trabalha com o motor elétrico potente com uma velocidade uniforme e suavidade de giro excepcional. A forma ergonômica das peças de mão permite um manuseio agradável: Trabalha também durante muito tempo, sem desgaste para o Técnico. E, porque a W&H valoriza a mais elevada qualidade, vem com 24 meses de garantia em ambas as peças de mão.




Peça de mão de alta rotação



Peça de mão técnica

A peça de mão técnica

Vantagens

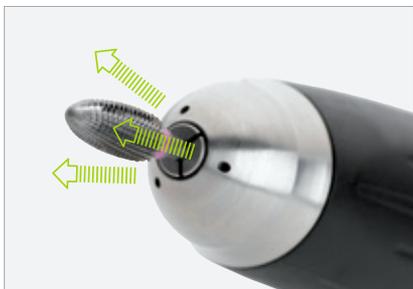

Com a função de jateamento, simplesmente sopra as aparas e o pó para longe. Ao mesmo tempo, devido a essa ação, o sistema de aperto fica sempre limpo.



Extremamente potente: mesmo em trabalhos exigentes ainda há constante reserva de potência.



O motor »E-type« com ligação ISO somente pode ser adquirido para o Perfecta 300. Com ele é possível utilizar qualquer peça de mão ISO existente.

A peça de mão alta rotação


Vantagens



A velocidade do motor é regulada de maneira fácil e ideal, para trabalhar com segurança em todos os materiais cerâmicos.



Trabalhe de forma eficiente e silenciosa com até dez vezes mais força de tração que uma turbina (também na rotação esquerda).

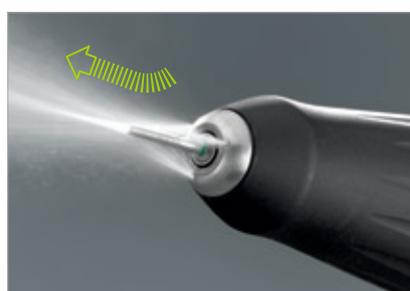

É possível ligar confortavelmente o spray triplo único. Ele protege contra microfissuras e garante refrigeração ideal em qualquer situação.

Um aparelho para todos os materiais

Com o Perfecta 900 é possível ligar a peça de alta rotação e a peça de mão técnica simultaneamente e, dessa forma, trabalhar todos os materiais com somente um aparelho.



Tudo no campo de visão tudo à mão

O seu trabalho já é suficientemente complicado, então o comando pode ser simples: Por esse motivo todos os modelos Perfecta têm um unidade de comando externo simples de utilizar. Com ele pode-se comandar e alternar todas as funções, para o Perfecta 900, entre as duas peças de mão. No grande display é apresentada a velocidade atual de forma clara e nítida. Configura a velocidade máxima por meio do regulador de velocidade no centro unidade de comando externo.



A unidade de comando externo

Vantagens



Os programas automáticos facilitam o seu trabalho

No »Modo Bistabil« automaticamente inicia com a velocidade que foi configurada. No modo »Tempomat« a velocidade regulada no momento é gravada automaticamente depois que for mantida por dois segundos.




Simplesmente comutar em vez de trocar de aparelho

Basta um toque em um botão para mudar no Perfecta 900 entre a peça de mão de turbina e a peça de mão motorizada. Assim, é necessário somente um aparelho para trabalhar em todos os materiais.

Comandos Precisos

variantes à sua escolha

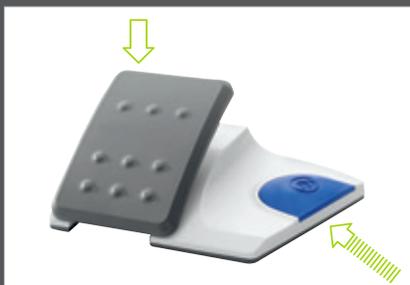

Aparelho de mesa

Com o pedal de acionamento se inicia o motor, regula a velocidade e ativa a função de purga.



Aparelho de joelho

Com o joelho se regula a velocidade e se ativa a função de purga.



Aparelho de pé

Com o comando de pedal se ativa a função de purga, se regula a velocidade e se alterna entre rotação esquerda e rotação direita.

A família Perfecta



- 1 Aparelho de mesa
- 2 Aparelho de joelho
- 3 Aparelho de pé (Perfecta 300 / Perfecta 600)
- 4 Aparelho de mesa (Perfecta 900, com o aparelho de joelho incl. alavanca de joelho n.º 8)
- 5 Unidade de comando externo
- 6 Pedal de acionamento
- 7 Tecla para função de purga
- 8 Alavanca de joelho para função de purga
- 9 Peça de mão motorizada (opcional no Perfecta 900)
- 10 Motor »E-type« com ligação ISO (opcional, somente para Perfecta 300)
- 11 Peça de mão de turbina
- 12 Depósito do líquido refrigerante (400 ml, somente no Perfecta 900)

Os acessórios Perfecta



Adaptador de aparelho de fresa – Paralelo 100 por cento

Com o adaptador de aparelho de fresa é possível fixar a peça de mão de turbina em quase todos os aparelhos de fresa. Dessa forma ele é utilizado em paralelo e propicia construções fresadas perfeitas.



Conjunto de ferramentas e limpeza incluídos

No suporte da peça de mão se encontra um útil conjunto de ferramenta e limpeza. Com ele é possível fazer a manutenção de modo simples e adequado da sua peça de mão motorizada.




Suporte ajustável com flexibilidade

Tudo no campo de visão: Com o suporte ajustável é possível montar unidade de comando externo na parede, mesa ou no painel de parede.

Peça de mão técnica 945 para a prática

Com a peça de mão técnica 945 se podem executar correções de forma rápida e eficiente, adaptações e processamentos posteriores de próteses totais ou parciais Além disso, a peça de mão se encaixa em qualquer motor com ligação ISO.

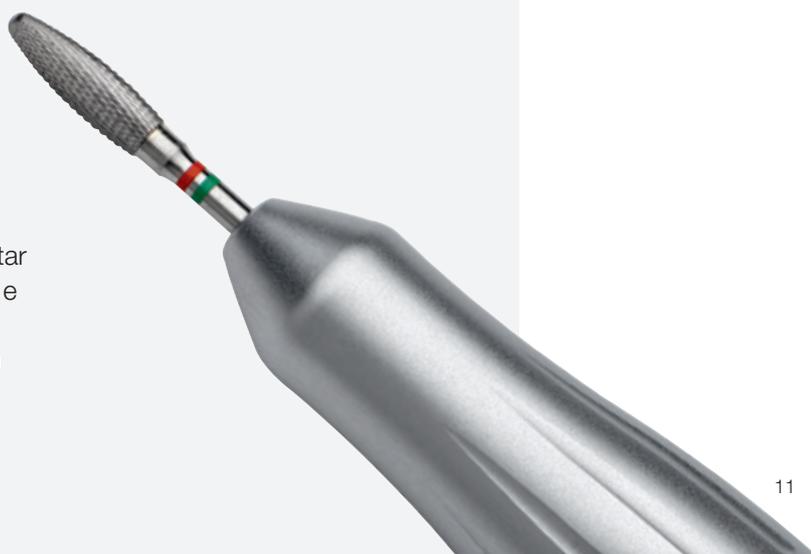

Especificações técnicas

CE

Tipos	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900
Peças de mão			
Peça de mão técnica com 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 min ⁻¹	●	-	-
Peça de mão técnica com 7,8 Ncm, 1.000 – 50.000 min ⁻¹	-	●	○
Peça de mão de alta rotação com 0,7 Ncm, 5.000 – 100.000 min ⁻¹	-	-	●
Motor sem escovas	●	●	●
Funções especiais			
Função de purga	-	●	●
Programas automáticos Bistabil / Tempomat	● / -	● / ●	● / ●
Rotação direita e esquerda	●	●	●
Variantes de aparelho			
Aparelho de mesa com pedal de acionamento / aparelho de joelho / aparelho de pé	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
Unidade de comendo externo (opcional no caso de aparelho de pé)	●	●	●
Motor »E-type« com acoplamento ISO, 5,5 Ncm, 1.000 – 40.000 min ⁻¹	○	-	-
Garantia			
24 meses	●	●	●

● Equipamento padrão

○ opcional

- não disponível

Maiores informações em wh.com

Peça de mão
técnica



Peça de mão de alta rotação

Fig. Fotos de símbolos. Equipamento adicional e conteúdo dos acessórios apresentados não estão contidos no material fornecido.

Produtor:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuidor no Brasil:

Wilcos do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Tel (24) 3064-1000
deptovendas@wilcos.com.br
www.wilcos.com.br