

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus
d'info sur
wh.com



Détartreur à air

rapide,
doux,
puissant

proxeo



La prophylaxie a du style

Rapide, doux, puissant.

Le détartreur à air comprimé avec spray intégré et deux faisceaux de lumière grand format est idéal pour éliminer mécaniquement la plaque et le tartre et pour nettoyer les surfaces radiculaires. Résultat : Des surfaces dentaires impeccablement entretenues améliorent le bien-être et la confiance des patients.



Réglable en continu

Une bague de contrôle règle l'intensité de la puissance pour s'adapter aux différents traitements.



Faisceaux de lumière grand format

Deux larges faisceaux de lumière éclairent parfaitement la zone de traitement.




Clé de changement d'insert

Remplacement facile des inserts avec la clé de changement d'insert W&H.



Spray intégré

Le spray intégré refroidit la zone de traitement sans interruption tout en éliminant microparticules et autres dépôts.

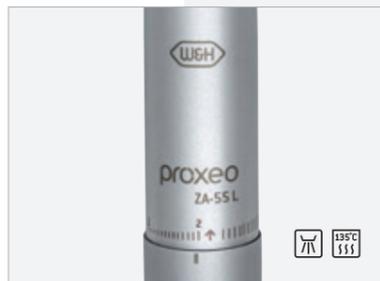

Hygiène irréprochable

Le nettoyage des instruments est particulièrement efficace grâce à leur surface lisse. Ils sont thermodésinfectables et stérilisables.



Kit adaptateur W&H

Le kit adaptateur W&H permet la préparation mécanique conforme – nettoyage et désinfection internes et externes – dans le thermodésinfecteur.

Des inserts pour chaque application

Polyvalence et ergonomie parfaites.

Le large choix d'inserts parfaitement étudiés assurent l'élimination efficace et en douceur du tartre, même dans les zones difficilement accessibles.



Insert de prophylaxie 1AU

Application universelle, également pour les surfaces de molaires avec inclinaison linguale.



Insert de prophylaxie 2AU

Pour les dents antérieures du maxillaire inférieur, les surfaces linguales, particulièrement adapté dans les cas de tartre tenace.



Insert de prophylaxie 3AU

Pour le détartrage des collets et pour l'élimination des dépôts de nicotine.



Insert de parodontologie 1AP

Élimination des dépôts sous gingivaux, en particulier dans les poches parodontales profondes.



Insert de parodontologie 2APr, 2API

Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux. Disponible en deux versions, coudé à droite ou à gauche.



Insert de parodontologie 3AP

Insert avec un revêtement diamant pour un débridement parodontal de furcations et de concavités.

Caractéristiques techniques

Détartreur à air Proxeo



Type :	ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Lumière :	oui	non
Puissance réglable :	oui	non
Fréquence :	6 kHz	
Amplitude :	< 200 µm	
Pression de fonctionnement :	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar / 3 ±0,3 bar	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar
Débit de liquide de refroidissement :	30 – 60 ml/min	
Raccord :	RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED, Multiflex®* / Sirona®*	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®*
Inserts W&H utilisables :	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour le détartreur à air W&H.	
Contenu de l'emballage :	inserts 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, clé de changement d'insert	

* Multiflex® et Sirona® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Type :	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Lumière :	non	
Puissance réglable :	non	
Fréquence :	6 kHz	
Amplitude :	<200 µm	
Pression de fonctionnement :	2,2 – 2,5 bar	
Débit de liquide de refroidissement :	au moins 30 ml/min	
Raccord :	 Raccord fixe	
Inserts W&H utilisables :	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour l'utilisation avec le détartreur à air W&H.	
Contenu de l'emballage :	2 x inserts 1AU	



Raccord W&H RM-34 LED pour connexion Multiflex®*

- › Possibilité d'utiliser des LED sans modifier l'unité dentaire
- › Longue durée de vie de la LED
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Garantie de 24 mois

Information réglementaire :

Dispositifs Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS

Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20403 AFR Rev. 003 / 10.05.2019
Sous réserve de modifications