

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Ablatore ad aria rapido e potente



proxeo SONIC

Profilassi con stile

Rapido e potente.

L'ablatore ad aria con spray integrato e con due grandi conduttori luminosi è l'ideale per la rimozione meccanica di placca e tartaro, così come per la pulizia della superficie radicolare. Il risultato: benessere e consapevolezza notevolmente maggiori nei pazienti grazie a superfici dentali sane.



Regolazione continua

Il regolatore della potenza permette di adattare in base all'impiego il livello di potenza, consentendone un uso controllato ma potente.



Grandi conduttori luminosi

Due grandi conduttori luminosi offrono l'illuminazione dell'area di intervento.




Scambiatore di punta

Sostituzione semplice delle punte con lo scambiatore di punta W&H.



Spray integrato

Lo spray integrato consente di raffreddare costantemente l'area di intervento.

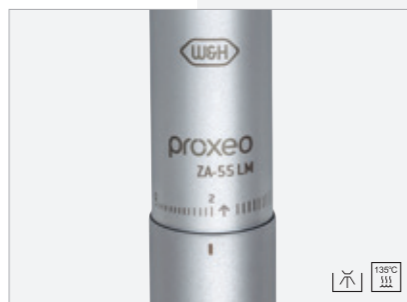

Progettati per livelli di igiene di prima qualità

Grazie alla loro superficie liscia, gli strumenti possono essere puliti con estrema semplicità e, oltre a essere termodisinfezzabili, sono anche sterilizzabili.

Punte per qualsiasi impiego

Design versatile ed ergonomico.

Il versatile assortimento di punte e il design ottimale di ogni singola punta consentono una rimozione profonda e non traumatica del tartaro, anche nei punti più difficili da raggiungere.¹



Punte per profilassi 1AU

Per rimozione di tartaro, uso universale, anche per superfici curve di molari con inclinazione linguale.



Punte per profilassi 2AU

Per frontali inferiori, superfici linguali, in caso di tartaro spesso e duro, fortemente adesivo.




Punte per profilassi 3AU

Per la rimozione di placca in zona cervicale, anche per rimuovere depositi di nicotina.



Punte per parodontologia 1AP

Eliminazione di depositi subgingivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.

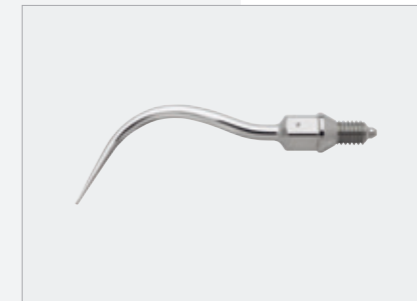

Punte per parodontologia 2APr, 2API

Punta per la rimozione di depositi subgingivali. Disponibile con curvatura a destra o a sinistra.



Punte per parodontologia 3AP

Punta diamantata per il debridement parodontale di forcazioni e concavità.

¹Seidel, M., Borenus, H., Schorr, S. et al. Results of an experimental study of subgingival cleaning effectiveness in the furcation area. BMC Oral Health 21, 381 (2021).

Dati tecnici

Ablatori ad aria Proxeo



Tipo:	ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Luce:	Si	No
Regolazione della potenza:	Si	No
Frequenza oscillazione:	6 kHz	
Ampiezza oscillazione:	< 200 µm*	
Pressione di esercizio:	3,4 ± 0,3 bar	
Quantità fluido di raffreddamento:	20 – 50 ml/min	
Raccordo:	RM-34 LED, Multiflex®** / Sirona®**	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®**
Punte W&H utilizzabili:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Le punte di altri produttori devono essere approvate per l'uso con l'ablatore W&H.	

* In base alla punta e all'impostazione della potenza.

** Multiflex® e Sirona® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Tipo:	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Luce:	No	
Regolazione della potenza:	No	
Frequenza oscillazione:	6 kHz	
Ampiezza oscillazione:	< 200 µm*	
Pressione di esercizio:	2,5 ± 0,3 bar	
Quantità fluido di raffreddamento:	20 – 50 ml/min	
Raccordo:	 Raccordo fisso 	
Punte W&H utilizzabili:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Le punte di altri produttori devono essere approvate per l'uso con l'ablatore W&H.	



Raccordo W&H RM-34 LED per attacco Multiflex®**

- › Funzionamento del LED senza regolazione necessaria dell'unità dentale
- › Maggiore durata del LED
- › Regolazione continua dell'alimentazione dell'acqua per lo spray
- › Valvola di non ritorno
- › 24 mesi di garanzia

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 51111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), **Italia**
 t +39 035 6663911
 f +39 035 0662504
 office.it@wh.com
 wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive non fanno parte della dotazione.

20403 AIT Rev. 003 / 26.09.2024
 Con riserva di modifiche