

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Scaler de aire rápido, cuidadoso, potente

proxeo



Profilaxis con estilo

Rápido, cuidadoso, potente.

El scaler accionado por aire con spray integrado y dos grandes salidas de luz es ideal para la eliminación mecanizada de la placa y el sarro, así como la limpieza de la raíz del diente. El resultado: aumento de la sensación de bienestar y confianza de sus pacientes gracias a la limpieza de las superficies dentales.



Regulación continua

El uso potente y controlado de la potencia puede adaptarse según la aplicación por medio del regulador de potencia.



Gran salida de luz

Dos grandes salidas de luz iluminan a la perfección la zona de tratamiento.




Cambiador de puntas W&H

Cambio fácil de las puntas y protección ante lesiones con el cambio de puntas de W&H.



Spray integrado

El spray integrado refrigera constantemente el lugar de tratamiento y limpia simultáneamente los depósitos y las micropartículas retiradas.

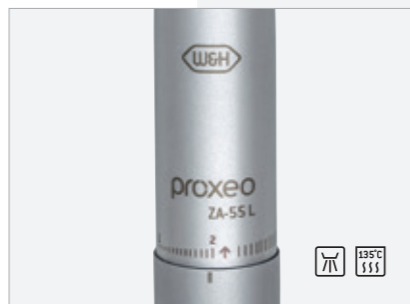

Higiene de primera clase

Los instrumentos se pueden limpiar fácilmente gracias a su superficie lisa y son termodesinfectables y esterilizables.



Juego de adaptador de W&H

El juego de adaptador de W&H le permite limpiar y desinfectar las puntas automáticas usando un procedimiento validado en el termodesinfectador, por dentro y por fuera.

Puntas para cada aplicación

Versátil y ergonómicamente perfecto.

La variedad del surtido de puntas y la óptima ergonomía de cada una de ellas le permite también una eliminación profunda y cuidadosa del sarro en las zonas de difícil acceso.




Punta de profilaxis 1AU

Para la eliminación del sarro, uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual.




Punta de profilaxis 2AU

Para dientes anteriores en el maxilar inferior, superficies linguales, y en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras.

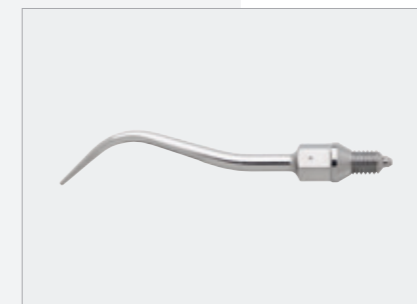


Punta de profilaxis 3AU

Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina.

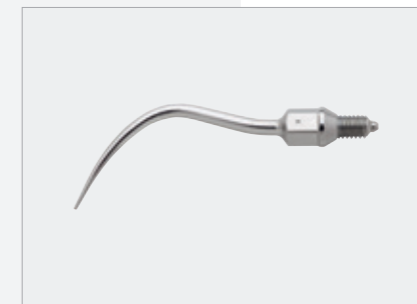

Punta de periodontología 1AP

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.

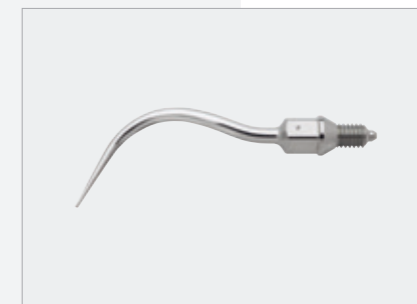

Punta de periodontología 2APr, 2API

Punta para la eliminación de depósitos subgingivales. Disponible curvado hacia la derecha o hacia la izquierda.



Punta de periodontología 3AP

Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.

Datos técnicos

Scaler de aire Proxeo



Modelo:	ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Luz:	sí	no
Regulación de potencia:	sí	no
Frecuencia de oscilación:	6 kHz	
Amplitud de oscilación:	< 200 µm	
Presión de funcionamiento:	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar / 3 ±0,3 bar	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar
Cantidad de refrigerante:	30 – 60 ml/min	
Acoplamiento:	RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED, Multiflex®* / Sirona®*	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®*
Puntas W&H utilizables:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Las puntas de otros fabricantes deben estar autorizadas para el scaler de aire de W&H.	
En el contenido suministrado:	Punta 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, Cambiador de puntas	

* Multiflex® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Modelo:	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Luz:	no	
Regulación de potencia:	no	
Frecuencia de oscilación:	6 kHz	
Amplitud de oscilación:	<200 µm	
Presión de funcionamiento:	2,2 – 2,5 bar	
Cantidad de refrigerante:	min. 30 ml/min	
Acoplamiento:	 Conexión fija 	
Puntas W&H utilizables:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Las puntas de otros fabricantes deben estar autorizadas para el scaler de aire de W&H.	
En el contenido suministrado:	2 x Punta 1AU	



Acoplamiento LED RM-34 de W&H para conexión Multiflex®*

- Aplicación de LED sin necesidad de adaptación de la unidad dental
- Larga vida útil de los LED
- Regulación continua de la entrada de agua del spray
- Válvula antiretorno
- 24 meses de garantía

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 51111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Distribución:

Wehadent Iberica S.L Unipersonal
 C/Canónigo Tárrega, 33
 46014 Valencia, **España**
 t +34 96 353 20 20
 oficinas.es@wh.com
 wh.com