

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf **wh.com**



# Effizient. Flexibel. Sanft.

Piezo Scaler  
Handstücke PB-3  
und PB-5 L Q  
Ultraschallscaler  
der Spitzenklasse



# Piezo Scaler mit Spitzenleistung

Der W&H Ultraschallscaler glänzt durch seine hohe Abtragsleistung und der sanften, patientenschonenden Anwendung. Er bietet höchsten Komfort und ist dank effektivem W&H Spitzensystem flexibel im Einsatz. Modernste Piezotechnologie verbessert Effizienz und taktiles Empfinden bei allen klinischen Indikationen.



## W&H Spitzensystem

Das mit Endanwendern entwickelte Spitzensystem ist perfekt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte abgestimmt.



## Maximale Effizienz

Leistungsstark und sanft zugleich für eine schonende Anwendung und eine schmerzfreie Behandlung.

## Leicht zu reinigen

Beide Piezo Scaler Handstücke lassen sich zum leichteren und besseren Reinigen einfach zerlegen, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.




## Handlich und komfortabel

Die Form des Handstücks und das geringe Gewicht sorgen für höchsten Komfort.



## 5-fach Ring LED

Taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle durch 5 LEDs mit dem PB-3 LED Handstück.

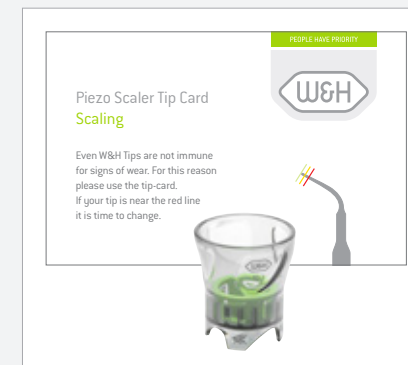

## Nützliches Zubehör

Spitzen einfach und sicher mit dem Spitzenwechsler wechseln und mit der Spitzenkarte überprüfen.



## Behandlungsstelle stets gekühlt

Der integrierte Spray sorgt für eine konstante und effektive Kühlung der Behandlungsstelle.

# Kompaktes hochqualitatives Spitzensystem für Piezoscaler

Universal- und Spezialspitzen mit Endanwendern entwickelt und sowohl auf die klinischen Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und der einzelnen Behandlungsschritte als auch auf die technischen Anforderungen der W&H Piezotechnologie abgestimmt.



## Universalspitzen

- << 1UQ, 2UQ, 3 UQ
- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Für die supragingivale Zahnsteinentfernung in allen Quadranten.



## Implant Clean Spitze

- << 1IQ
- 1I

Zur schonenden Reinigung von Implantaten und dazugehörigen Restaurationen.



## Parodontalspitzen


- << 1PQ, 3Pr/3PIQ, 4PQ, 5PrQ/5PLQ
- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Für die initiale und unterstützende Parodontitistherapie (UPT).

©Kapt-Romana

# Vielfältige Anwendung

Dank stufenloser Leistungsregulierung lassen sich die W&H Piezoscaler mühelos auf die jeweilige Anwendung und Spitze einstellen. Von Prophylaxe und Parodontologie über die Implantaterhaltung oder Endodontie bis zur Mikropräparation von Restaurationen, die Anwendungsmöglichkeiten sind besonders vielfältig.

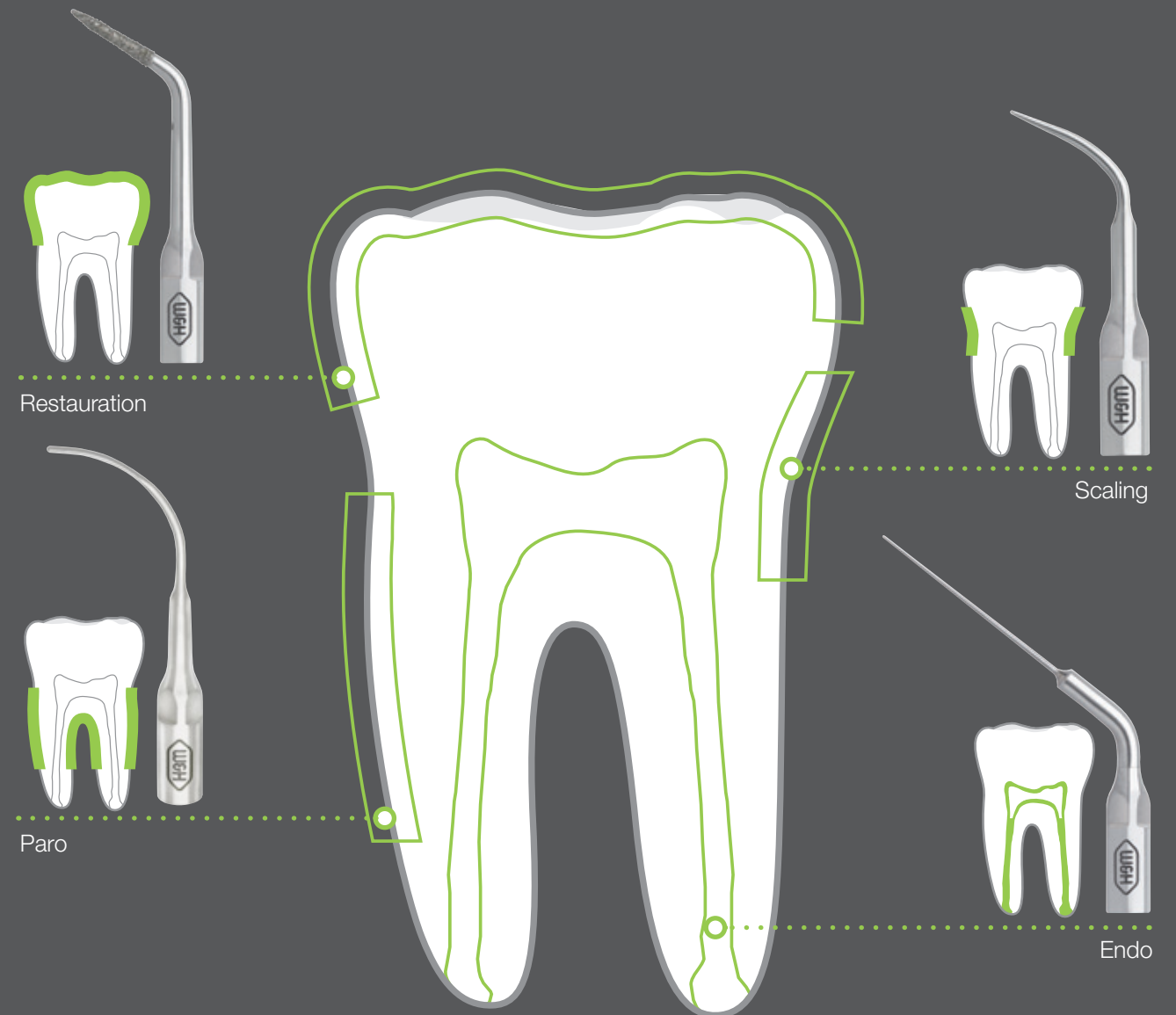



## W&H Piezo Scaler

Die W&H Piezo Scaler lassen sich optimal in Ihren individuellen Workflow integrieren. Entscheiden Sie sich für einen Proxeo Ultra Piezo Scaler oder nutzen Sie die Vorteile einer Built-in Solution – der komfortablen Integration in Ihre Dentaleinheit.



### PB-530

Der W&H Piezo Scaler mit kabelloser Fußsteuerung für mehr Bewegungsfreiheit und höchsten Anwenderkomfort.



### PB-520/PB-510

Die kompakten Modelle der Proxeo Ultra Piezo Scaler überzeugen mit oder ohne Tank.



### LED Handstück

Das LED-Ring ermöglicht eine taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



### Built-in Set analog

Machen Sie Ihre Behandlungseinheit zukunftsfit. Mit den W&H Built-in Solutions, wie etwa dem PB-5 L Q Built-in Set analog. Die Piezo Scaler Einbaulösung der neuen Generation – kompatibel und kombinierbar.



### Spitzenmäßige Auswahl

Das Proxeo Ultra ist mit dem einzigartigen Q-Link-Schnellspannsystem verfügbar. Zudem sind zwei weitere Handstücke mit klassischem Gewinde erhältlich.

## Technische Daten

Piezo Scaler Handstück	PB-3	PB-5 L Q	PB-5 L	PB-5 L S
Licht:	ohne Licht	LED-Ring		
Gewicht:	52,5 g	55 g		
Länge ohne Spitze:	104,3 mm	135 mm (mit Kupplung)		
Durchmesser:	20,2 mm	18,5 mm		

Built-in Set analog	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Piezo Controller:	PC-1.0	
Anschlussset elektrisch:	✓	
Drehregler:	✓	
Versorgungsschlauch:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Handstück:	PB-3	PB-5 L Q/PB-5 L
Spitzenwechsler mit eingesetzter Spitze:	TW-1: 1U, 1P	TQ-1: 1UQ, 2UQ, 1PQ/TW-1: 1U, 2U, 1P

### Tania Eberle

Dentalhygienikerin, Deutschland

»Was manuell oft nicht zu erreichen ist, schafft der W&H Piezo Scaler mit Leichtigkeit. Ein sehr überzeugendes Produkt!«



### Stand-alone-Lösungen

Alle Informationen zu den W&H Piezo Scaler Stand-alone-Lösungen, wie Proxeo Ultra finden Sie auf [wh.com](http://wh.com)

# Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X	X			X		
Built-In	X	X		X	X		X

\* Q-Link Spitzen (z. B. 1UQ, 2UQ) sind mit dem PB-5 L Q kompatibel.

\*\* W&H Spitzen mit Satelec Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogerätes zu sorgen.

## Hersteller:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
**wh.com**

## Vertrieb:

**W&H Deutschland GmbH**  
 Ludwigstraße 27  
 83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**  
**t** +49 8651 904 244-0  
**f** +49 8651 904 244-4  
 office.de@wh.com  
**wh.com**

**W&H Austria GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53  
 51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-239  
**f** +43 6274 6236-890  
 office.at@wh.com  
**wh.com**

**W&H CH-AG**  
 Industriepark 9  
 8610 Uster, **Schweiz**  
**t** +41 43 4978484  
**f** +41 43 4978488  
 info.ch@wh.com  
**wh.com**