

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora no seu  
fornecedor ou  
em **wh.com**



“Assistina

ONE



a única que acelera  
MEU trabalho.”



assistina<sup>ONE</sup>



## Assistina ONE para uma manutenção perfeita

A Assistina One é a primeira escolha para a manutenção de instrumentos com transmissão dentários, tais como peças de mão, micromotores e cavitadores ultrassônicos a ar. A nova geração de dispositivos de conexão única da W&H está equipada com o excepcional sistema Quick Connect para troca entre peças de mão. Ela pode ser facilmente adaptada às exigências individuais e perfeitamente integrada em qualquer fluxo de trabalho.



### Tampa abre-fácil removível

Veda completamente o dispositivo e pode ser removida facilmente



### Botão de partida de um toque

Para um manuseio intuitivo e sem complicações



### Tempo de ciclo curto

Apenas 18 segundos para todo o processo de lubrificação e limpeza



### Cartuchos de reabastecimento prontos para uso

Para reabastecimento rápido, limpo e sem complicações do Service Oil e Activefluid

### Filtro HEPA

Para cumprir as normas de higiene e manter o ambiente de trabalho limpo



### Superfícies lisas

Para uma limpeza mais fácil e eficiente do dispositivo

## Assistina ONE, a única pronta ao simples toque de um botão

Todo o processo de lubrificação e limpeza dos canais de refrigeração leva apenas 18 segundos. Isso torna a Assistina One a solução de manutenção mais rápida em sua classe. Funciona exclusivamente com ar comprimido. Não é necessária uma conexão elétrica. A Assistina One é instalada e pronta para uso em um estalar de dedos. Com seu botão de partida de um toque, e o prático sistema de cartuchos para repor o óleo e líquido de limpeza, é uma solução perfeita para consultórios e clínicas odontológicas que prezam por cuidar e manter em perfeito estado suas peças de mão.



### Sistema Quick Connect

Troca entre peças de mão flexível com adaptadores Quick ISO e Quick RM

“Assistina

ONE



a única que  
ME dá suporte.”

## Assistina ONE para um cuidado completo

Instrumentos com transmissão de alta qualidade requerem manutenção de alta qualidade. Na verdade, a manutenção adequada e profissional desempenha um papel essencial na longevidade e no valor duradouro das peças de mão. O dispositivo garante a manutenção perfeita e executa corretamente os ciclos de lubrificação necessários para o funcionamento e longa vida útil das peças de mão odontológicas.

### Assistina ONE, para mais eficiência

A tecnologia inovadora de nebulização do óleo lubrifica os instrumentos odontológicos com transmissão mais rápida e completamente do que nunca. O óleo é primeiro atomizado no adaptador para formar uma fina névoa de óleo, que depois é soprada sob alta pressão para a peça de mão. As impurezas são soltas e todas as peças de transmissão são lubrificadas sem a necessidade de colocá-las em movimento. Os aerossóis são extraídos ativamente da câmara e o ar de exaustão é limpo por meio de filtros HEPA – para um ambiente de trabalho seguro e limpo.

### Assistina ONE, para mais eficácia

A Assistina One cuida da lubrificação perfeita dos componentes de transmissão, uma limpeza adequada dos canais de refrigeração, e a secagem por ar comprimido das peças internas. A limpeza dos canais de refrigeração remove e elimina possíveis entupimentos do spray de água, e assim garante um uso perfeito das peças de mão com baixo custo de manutenção e vida útil mais longa.



**Laranja:**

Lubrificação completa das peças de transmissão

**Verde:**

Limpeza adequada dos canais de refrigeração e secagem das peças internas da transmissão

## Assistina ONE para mais flexibilidade

A Assistina One é completamente voltada para as necessidades dos usuários em consultórios odontológicos. Diversos adaptadores para um alto grau de flexibilidade, design intuitivo para um manuseio confortável e excelentes resultados de lubrificação e limpeza: essa nova geração com uma conexão única eleva a manutenção das peças de mão, micromotores e cavitadores ultrassônicos a ar a um nível completamente novo.



## Assistina ONE para mais velocidade

Com o revolucionário sistema Quick Connect da W&H, a troca entre peças de mão nunca foi tão fácil. Basta conectar o adaptador Quick ISO ou Quick RM – e a manutenção de todos os instrumentos com transmissão com conexão padrão ISO ou de 4/6 orifícios pode começar. Com sua ampla seleção de adaptadores, a Assistina One atende às exigências de todos os tipos de consultórios e clínicas odontológicas.

**Quick RM** para turbinas



**Quick ISO** para peças de mão e contra-ângulos



### **Assistina ONE para mais variabilidade**

Para conexões de marcas específicas como a Roto Quick, basta selecionar o adaptador certo, conectar e acionar! Para obter o portfólio completo de adaptadores, digitalize o código QR.



## Assistina ONE, a única que facilita MEU trabalho

Selecionar o adaptador.



Conectar a peça de mão.



Fechar a tampa abre-fácil.




Pressionar o botão de partida. O programa de limpeza e lubrificação é iniciado automaticamente.



Após apenas 18 segundos, a limpeza e a lubrificação estão concluídas e a peça de mão está perfeitamente pronta para uso.

## Óleo ONE

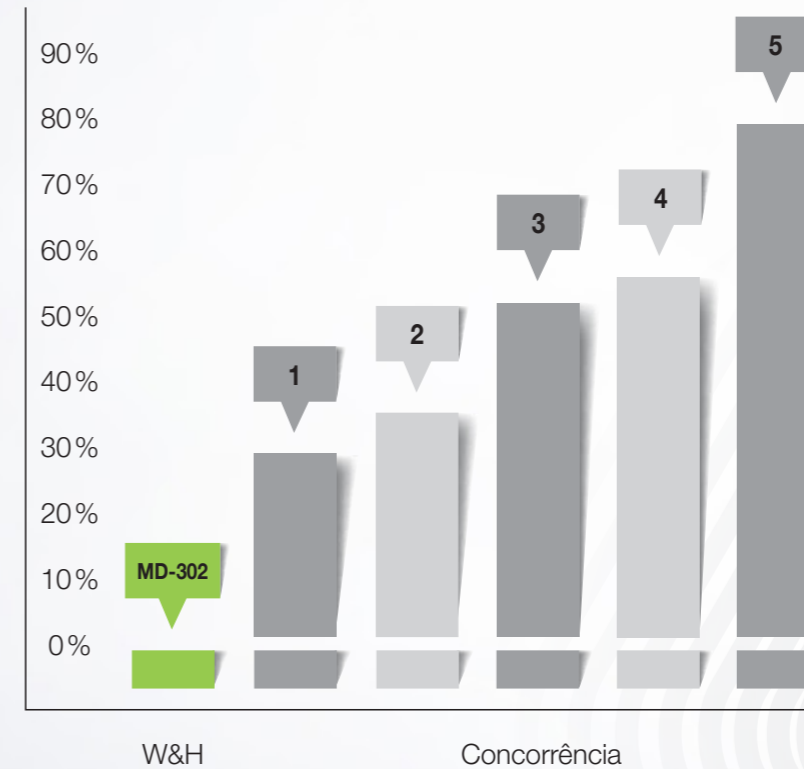

A manutenção das peças de mão com a Assistina One é mais econômica do que com a manutenção manual ou outros sistemas. Testes laboratoriais com óleos mostraram que o óleo Assistina One Care Set MD-302 resulta num valor de fricção reduzido, bem como num desgaste significativamente menor das peças de transmissão, em comparação com os produtos mais comuns da concorrência.

**Assim, a fricção das peças de transmissão pode ser reduzida de 28% para até 77%.**

## Um ONE versus 20



=



\*400 ml por de spray de óleo

O Assistina Care Set rende igual a 20 latas de spray de óleo MD-400\*. Isso permite preparar mais de 2.800 instrumentos, economizando dinheiro, tempo e desperdício. Com o máximo de lubrificação e o mínimo de consumo, a Assistina One é uma solução extremamente econômica.

#whdentalwerk  
f @ in  
video.wh.com

Agora no seu  
fornecedor ou  
em [wh.com](http://wh.com)



“Assistina

ONE



a única que  
ME faz feliz.”



assistina ONE

**Rápida, completa e eficiente**


A Assistina One facilita a manutenção das peças de mão dentárias para que o trabalho seja feito mais rapidamente. Com o menor tempo de ciclo em sua classe e resultados excepcionais, a inovadora Assistina One é uma solução de manutenção de alta qualidade – projetada para os melhores profissionais de Odontologia.

W&H AIMS  
**Segurança em  
primeiro lugar!**

aims / Advanced  
Infection Prevention  
Management Solutions

A higiene é de extrema importância na prática odontológica. O AIMS da W&H está aqui para apoiá-lo: com um amplo portfólio de produtos, conhecimento básico e todas as informações relevantes em um relance.

Para a sua segurança e a segurança dos seus pacientes.  
[aims.wh.com](http://aims.wh.com)

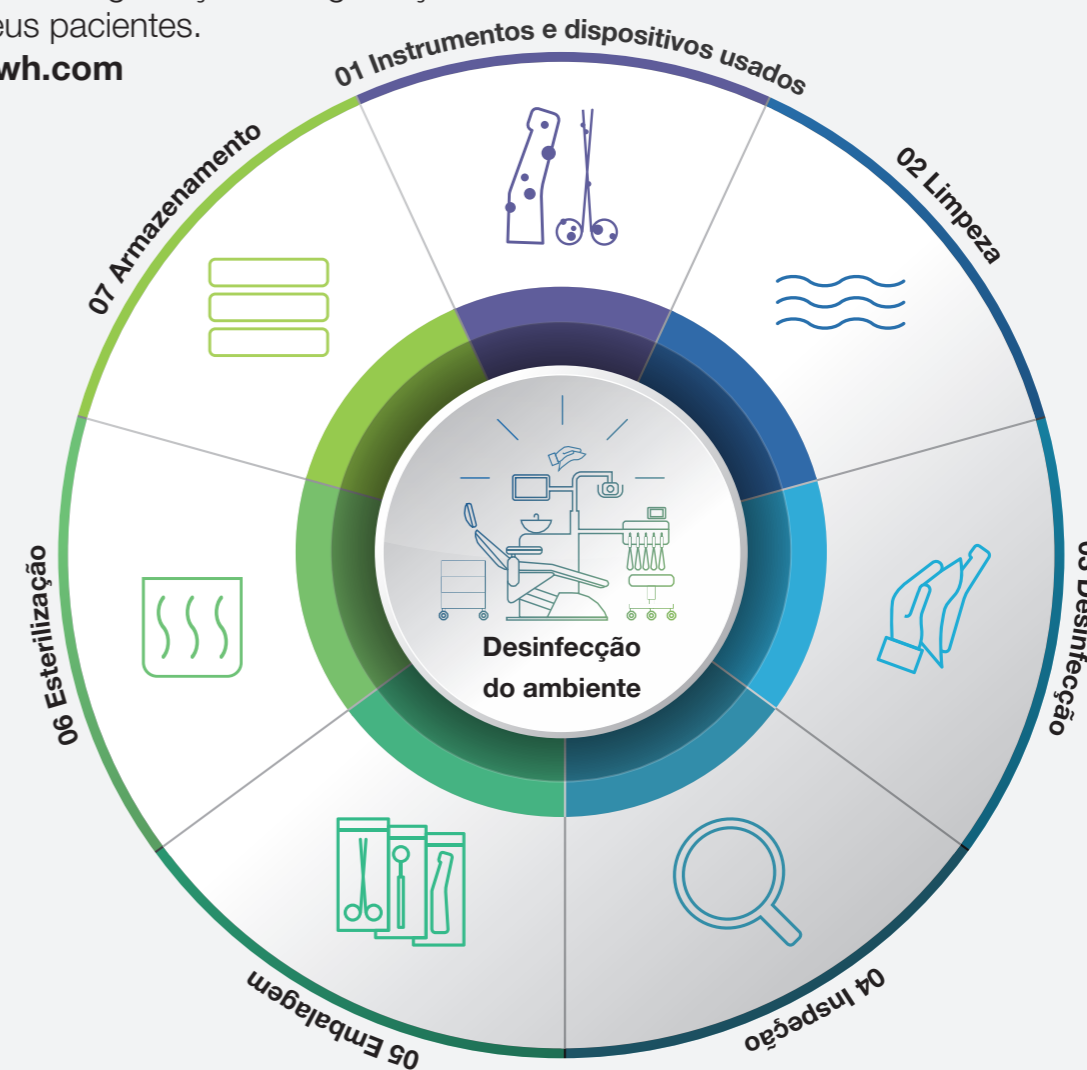

- Descontaminação
- Limpeza
- Desinfecção
- Inspeção & Manutenção
- Embalagem
- Esterilização
- Rastreabilidade e armazenamento

# Especificações técnicas

<b>Nome comercial:</b> <b>Tipo:</b>	<b>Assistina One</b> <b>MB-301</b>
<b>Procedimento:</b>	Limpeza dos canais de refrigeração, lubrificação
<b>Adequado para:</b>	Peças de mão e contra-ângulos, turbinas, micromotores e cavitadores ultrassônicos a ar
<b>Consumo de ar:</b>	aprox. 50 NI/min.
<b>Pressão de funcionamento:</b>	5–10 bar (Regulagem por regulador de pressão automático integrado)
<b>Dimensões (L x P x A):</b>	166 x 383 x 243 mm
<b>Peso:</b>	2,2 kg
<b>Capacidade de enchimento:</b>	200 ml W&H Activefluid (Solução de limpeza) 200 ml W&H Service Oil F1



## Assistina One Care Set

Um Set contém um cartucho de solução de limpeza, um Service Oil F1 e um filtro HEPA. Todos os consumíveis podem ser substituídos facilmente e sem ferramentas.

## Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Bürmoos, **Austria**

**t** +43 6274 6236-0

**f** +43 6274 6236-55

office@wh.com

**wh.com**

Imagens meramente ilustrativas. Algumas imagens contêm acessórios e itens opcionais que não estão incluídos como padrão.

20562 APOB Rev. 000 / 15.11.2023  
Sujeito a alterações